



DCM Verify

[DICOM viewer アプリケーション]

※本製品は教育又は患者説明用のみに使用できます。

なめらかに画像を表示する DICOM viewer です。いつでも、どこでも、使用場所を選びません。
iPadもしくは、M1以降のチップを搭載したMacパソコンにより、治療計画装置以外でも、線量分布や
ビーム情報を確認する事ができます。

治療計画装置からデータをエクスポートするだけ
スピーディーでなめらかな画像表示を実現


ROIやビーム等、表示したい情報を選択可能

直観的な操作でズーム可能

各社治療計画装置に対応


DVH解析機能を搭載

BEV上にROIを表示

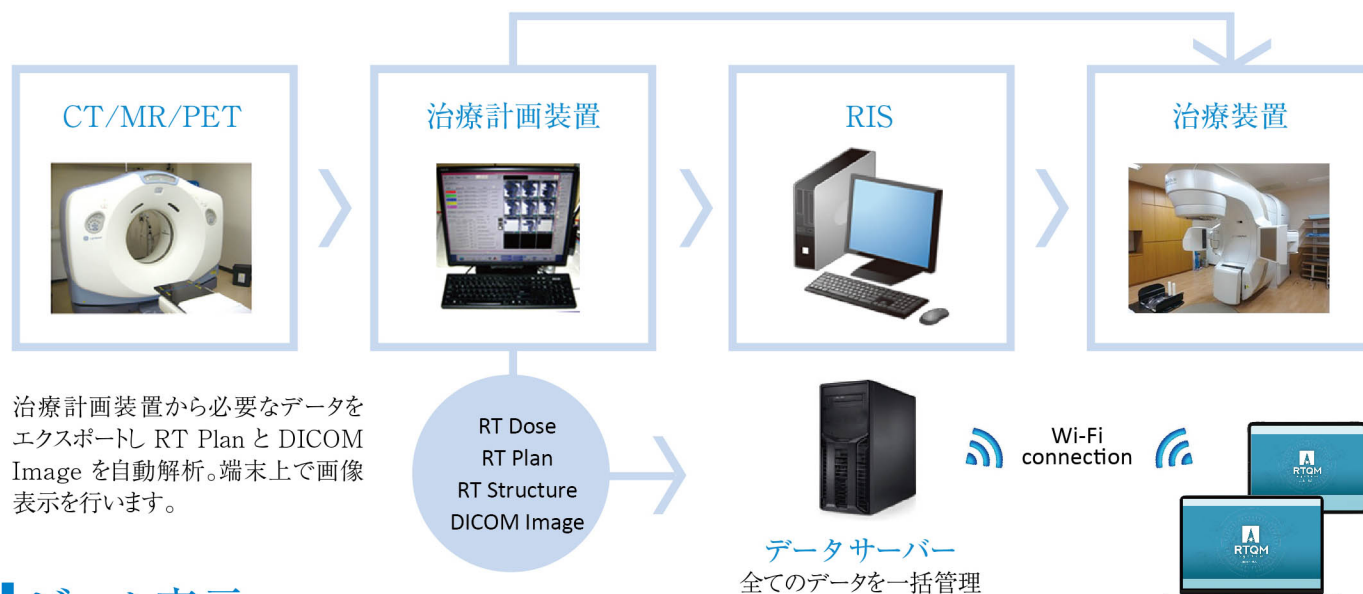


治療計画装置から必要なデータを
エクスポートし RT Plan と DICOM
Image を自動解析。端末上で画像
表示を行います。

ビーム表示

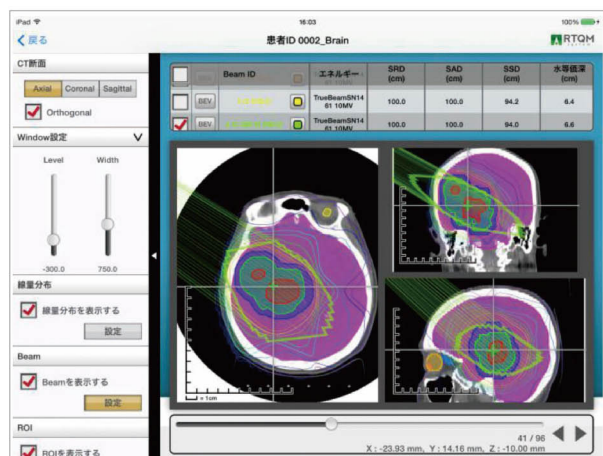


Beamパラメータを同じ画面上で確認することができます。
また、各Beamの表示、非表示も選択できます。

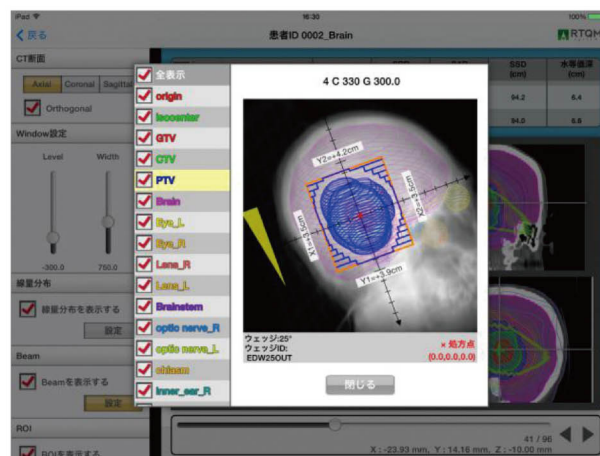


BEV上にROIを表示できます。
選択したROIを強調します。

DVH解析

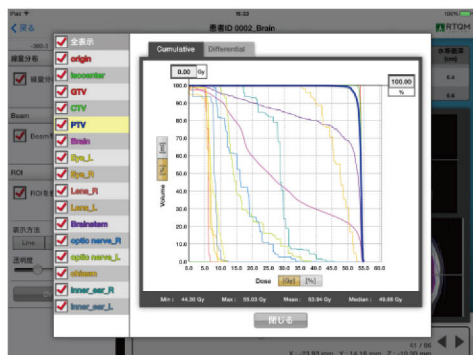


画面上にDVH解析を表示。
選択したROIのDVHをハイライト表示します。

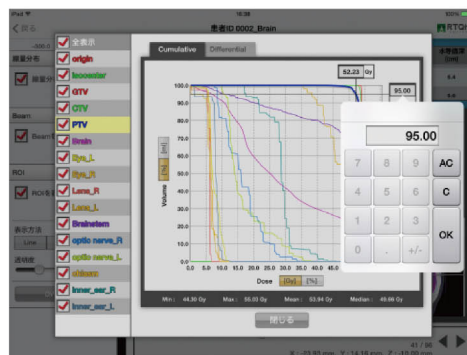


DVHパラメータの変更カーソルとDVHパラメータが統合され、
少ない操作で即座にDVHパラメータの変更が可能。

線量分布

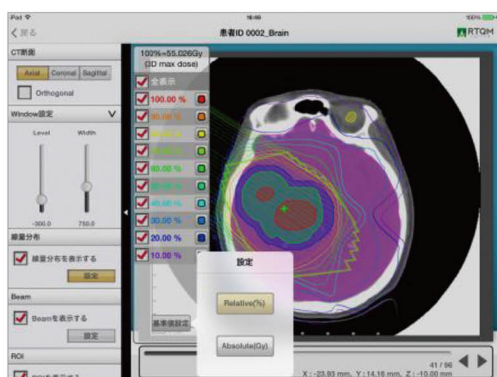


Relative, Absoluteは
それぞれ10段階で表示されます。
また、切替も画面上で行えます。

ROI

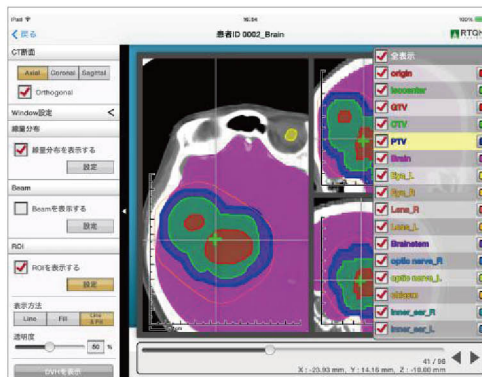


【Line & Fill 選択】

ROIの表示方法は、一度のタップで変更できます。
Fill設定時は透明度の変更も画面上で行えます。

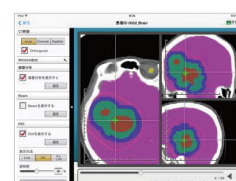


【Fill選択】

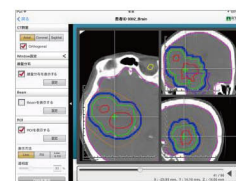

【Line選択】

小線源対応

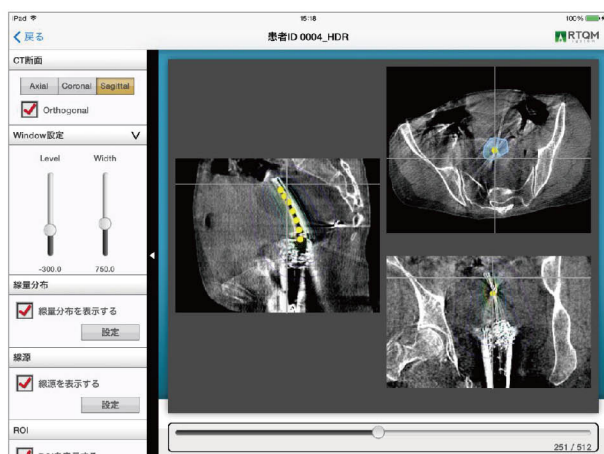

小線源治療

(OncentraによるHDRのDICOM RT)に対応します。

【表示される線源情報】

- ・停止位置
- ・停止時間
- ・空気カーマ強度
- ・校正日